

Options et accessoires pour sorbonnes sur paillasse

1 Montant latéral gauche type "Rack"



- montant latéral gauche type "Rack" avec vide technique permettant d'y installer un bénitier vertical et les utilités pour fluides, avec cette option le montant latéral gauche est réservé pour les fluides et le droit pour l'électricité



- bénitier 200 x 200 mm en PP fixé sur la paroi gauche de la sorbonne (option Rack nécessaire), tous les raccordements passent par le vide technique, la commande du bec est déportée sur le montant latéral gauche

2 Cadre de montage

- système de **barres transversales** pour création cadre de montage sur le plénum de la sorbonne


3 Compensation automatique de flux

- apport d'air extérieur dans la sorbonne pour éviter une insuffisance de débit d'aspiration et une dépression dans le local du laboratoire, nécessite un second système d'extraction

4 Revêtement interne en PVC

- revêtement de la chambre interne et du plénum arrière en PVC, vitre en verre acrylique
- pour utilisation avec acide fluorhydrique ou produits très agressifs à haute concentration

5 Système de collecte des déchets toxiques sous la sorbonne

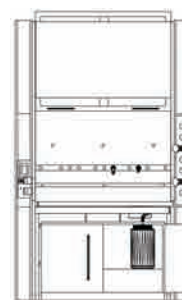

- bidon de récupération 30 litres en PVC monté chariot à 4 roues
- système de contrôle de niveau de remplissage avec alarme sonore et visuelle

6 Passage de câble



- passage à travers la paroi latérale gauche
- sortie sur montant gauche (proche des prises électriques)
- permet l'alimentation des appareils électriques placés à l'intérieur de la sorbonne sans gêner la fermeture de la vitre

7 Montants personnalisables



- couleur des montants latéraux au choix : gris (livré en standard), **bleu**, **rouge**, **jaune**, **vert** ou couleur spécifique sur demande (numéro de référence RAL)

Sorbonnes	1200 mm	1500 mm	1800 mm
accessoires et personnalisation			
1montant latéral gauche "Rack"	ACP1240	ACP1250	ACP1280
2cadre de montage	ACP1200	ACP1500	ACP1800
3compensation de flux automatique	sur demande		
4revêtement interne en PVC	ACP1201	ACP1501	ACP1801
5système de collecte des déchet	ACP1203	ACP1503	ACP1803
6passage de câble	ACP1204	ACP1504	ACP1804
8détecteur de présence	ACP1205	ACP1505	ACP1805
9"flow security touch"	ACP1206	ACP1506	ACP1806
7montants bleus RAL5024	ACP1207	ACP1507	ACP1807
7montants rouges RAL3000	ACP1208	ACP1508	ACP1808
7montants jaunes RAL1003	ACP1209	ACP1509	ACP1809
7montants verts RAL6024	ACP1210	ACP1510	ACP1810
7autre couleur RAL pour montants	sur demande		
bénitier encastré dans la paroi pour sorbonnes design "Rack"			
1bénitier 200 x 200 mm en PP pour montant latéral optionnel "Rack"	ACP1241	ACP1541	ACP1841
bénitiers sur plan de travail			
bénitier PP blanc 300 x 150 mm	ACP1212	ACP1512	ACP1812
bénitier en grès 150 x 300 mm	ACP1213	ACP1513	ACP1813
bénitier en grès 300 x 300 mm	ACP1214	ACP1514	ACP1814
cuves sur plan de travail			
cuve PP blanche 400 x 400 mm	ACP1215	ACP1515	ACP1815
cuve en grès 400 x 400 mm	ACP1216	ACP1516	ACP1816
cuve en grès 500 x 400 mm	ACP1217	ACP1517	ACP1817
Meubles métalliques sous sorbonnes			
nombre de meuble sous paillasse	1 x 900 mm	1 x 1200 mm	1 x 1200 + 1 x 600 mm
une porte à droite largeur 600 mm	-	-	ACP1892
une porte à gauche largeur 600 mm	-	-	ACP1893
deux portes largeur 900 mm	ACP1290	-	-
deux portes largeur 1200 mm	-	ACP1590	ACP1890
Meubles en mélaminé sous sorbonnes			
nombre de meuble sous paillasse	1 x 900 mm	1 x 1200 mm	1 x 1200 + 1 x 600 mm
une porte à droite largeur 600 mm	-	-	ACP1832
une porte à gauche largeur 600 mm	-	-	ACP1833
deux portes largeur 900 mm	ACP1234	-	-
deux portes largeur 1200 mm	-	ACP1535	ACP1835
ventilation pour meubles sous sorbonnes			
avec raccordement sur ventilation sorbonne	ACP1226	ACP1526	ACP1826
sans raccordement sur ventilation sorbonne	ACP1227	ACP1527	ACP1827

8 Détecteur automatique de présence par capteur infra-rouge



- détection de la présence de l'utilisateur : mise en service automatique de la ventilation, levée de la vitre à 400 mm
- hors présence de l'utilisateur, mise hors service et descente de la vitre
- livré avec télécommande complémentaire pour contrôle à distance, levée automatique de la vitre en cas de détection d'un obstacle dans la zone de fermeture (câble ou autre)
- option disponible uniquement pour sorbonnes avec vitre guillotine motorisée

9 "Flow security Touch"



- mise en service de la ventilation à puissance maximum au simple touché de la poignée de la vitre guillotine
- accroissement sensible de la sécurité du personnel pendant les opérations d'ouverture / fermeture de la vitre (variateur de fréquence ou volet papillon motorisé indispensable)

Meubles sous sorbonne

- meubles standard pour produits chimiques et corrosifs
- porte à charnière avec une ouverture à 172° avec amortisseur de battement
- 4 roues pivotantes, 2 roues avec frein
- étagère interne réglable en hauteur
- meuble livré monté
- serrure sur porte et tiroir en option
- raccord de ventilation sur le système d'extraction de la sorbonne : en option
- version métallique ou mélaminée
- coffres de sécurité pour produits inflammables : voir page 320

Utilités électriques sur montant latéral gauche



- prises électriques françaises avec interrupteur montées sur montant latéral gauche
- lampes et prises ATEX
- autres prises sur demande

Utilités électriques sur le montant de gauche		
Prises électriques avec interrupteur		
bloc 2 prises EE 10/16A	UTE100	
bloc 4 prises EE 10/16A	UTE101	
prise EE supplémentaire	UTE102	
Prises électriques ATEX		
prise ATEX	UTE103	
interrupteur pour prise ATEX	UTE104	
Autres prises électriques		
prises IEC, IEC interbloquées et EE UNEL sur demande		
Lampes ATEX pour sorbonne		
lampe ATEX sorbonne 1200 mm	UTE105	
lampe ATEX sorbonne 1500 mm	UTE106	
lampe ATEX sorbonne 1800 mm	UTE107	

Utilités fluides sur montant latéral droit



- bec eau bénitier ou gaz fixé sur option "Rack" sur la paroi gauche de la sorbonne avec commande déportée sur le montant latéral droit
- robinet col de cygne eau à fixer sur la paillasse avec commande déportée sur montant latéral
- robinet et colonne de gaz à fixer sur la paillasse avec commande déportée sur montant latéral
- flexibles de raccordement de longueur 1500 mm, autre longueur sur demande

Utilités de fluides sur le montant de droite	
Eau avec commande déportée sur montant latéral	
bec eau pour bénitier "Rack"	UTF200
robinet col de cygne eau	UTF201
Gaz avec commande déportée sur montant latéral	
bec gaz pour Rack	UTF202
robinet et colonne de gaz	UTF203
robinet et colonne de azote	UTF204
robinet et colonne de vide	UTF205
robinet colonne d'air comprimé	UTF206
Flexibles de raccordements L1500 mm	
flexible eau	UTF113
flexible gaz homologué	UTF114
flexible vide, air, etc.	UTF115
flexible bénitier standard	UTF116
siphon DN40 mm	UTF117
flexible bénitier "Rack"	UTF118