


Anses en Contracid ou en platine

anses en Contracid :
10 à 20 fois moins cher
que les anses en platine

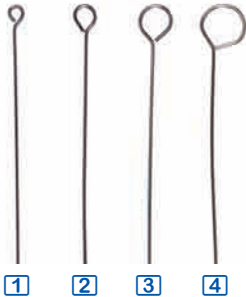

Le Contracid est un alliage spécial qui peut être porté à incandescence et remplace ainsi avantageusement le platine.

anses Contracid longueur 40 mm

Ø fil	Ø anse	référence	Prix HT
0,5 mm	Ø 1 mm	AC40051 [1]	
	Ø 2 mm	AC40052 [2]	
	Ø 3 mm	AC40053 [3]	
	Ø 5 mm	AC40055 [4]	
0,7 mm	Ø 1 mm	AC40071 [1]	
	Ø 2 mm	AC40072 [2]	
	Ø 3 mm	AC40073 [3]	
	Ø 5 mm	AC40075 [4]	

anses Contracid longueur 60 mm

Ø fil	Ø anse	référence	Prix HT
0,5 mm	Ø 1 mm	AC60051 [1]	
	Ø 2 mm	AC60052 [2]	
	Ø 3 mm	AC60053 [3]	
	Ø 5 mm	AC60055 [4]	
0,7 mm	Ø 1 mm	AC60071 [1]	
	Ø 2 mm	AC60072 [2]	
	Ø 3 mm	AC60073 [3]	
	Ø 5 mm	AC60075 [4]	

anses Contracid longueur 100 mm

Ø fil	Ø anse	référence	Prix HT
0,7 mm	Ø 1 mm	AC100071 [1]	
	Ø 2 mm	AC100072 [2]	
	Ø 3 mm	AC100073 [3]	
	Ø 5 mm	AC100075 [4]	

anses platine iridium longueur 40 mm

Ø fil	Ø anse	référence	Prix HT
0,5 mm	Ø 1 mm	AP40051 [1]	
	Ø 2 mm	AP40052 [2]	
	Ø 3 mm	AP40053 [3]	
	Ø 5 mm	AP40055 [4]	
0,7 mm	Ø 1 mm	AP40071 [1]	
	Ø 2 mm	AP40072 [2]	
	Ø 3 mm	AP40073 [3]	
	Ø 5 mm	AP40075 [4]	

Porte-anse avec mandrin

Les anses peuvent être insérées très facilement dans le porte-anse avec mandrin dont la partie métallique est en acier inoxydable et le manche en matière plastique ; longueur : 240 mm



référence	Prix HT
PA Porte-anse avec mandrin	

Spatules en Contracid ou en platine



référence	Prix HT
SPATC Spatule contracid Ø 0,5 x 40 mm	
SPATP Spatule platine Ø 0,5 x 40 mm	

Incinérateur de bactéries LMR®

sécurité du personnel

plus de flambage des anses
et des tubes de culture
dans une flamme à l'air libre



- spécialement conçu pour la stérilisation des anses, aiguilles et ouvertures des tubes de culture
- les boîtes de milieux de culture autour d'une flamme à l'air libre montrent la croissance des micro-organismes projetés, alors que celles qui se trouvent autour de l'incinérateur LMR ne montrent aucune croissance : les matières organiques ont été incinérées en toute sécurité, profondément à l'intérieur du tube chauffant
- ouverture élargie en entonnoir vers l'extérieur pour permettre la stérilisation des extrémités des tubes de culture
- stérilisation complète par rayonnement infrarouge en 5 à 8 secondes
- température optimale de stérilisation : 850°C atteinte en 6 minutes
- stabilité assurée par un support lourd
- aucun risque d'incendie ni de brûlures
- dim. incinérateur : Ø15 x 145 mm
- puissance : 100 W
- dim. (l x p x h) : 95x190x180 mm / 1,5 kg

référence	Prix HT
INLMR Incinérateur de bactéries LMR	

Ensemenceurs rotatifs

ensemencement manuel ou
électrique pour étalement
uniforme des boîtes de Pétri

ensemencement rotatif manuel



- plaque activée manuellement
- pour boîtes de Pétri Ø100 et Ø150 mm
- dim. : Ø160 x h45 mm / 2,3 kg

ensemencement rotatif électrique



- corps en acier inoxydable
- mise en service sans contact par capteur infra-rouge
- fonctionnement en continu, pendant un temps programmé (de 3 s à 2 min) ou par intermittence grâce à une pédale (en option)
- vitesse : 10 à 100 tr/min
- pour boîtes de pétri Ø 100 mm (Ø150 mm en option sur demande)
- dim. : Ø160x h70 mm / 1 kg

référence	Prix HT
ST9000 Ensemencement manuel	
ST9600 Ensemencement électrique	
ST9580 Pédale de commande	