

Écouvillons stériles en tube plastique avec milieu de transport viral

certification
DM 93/42/CE

Conservation des micro-organismes entre le prélèvement et le laboratoire d'analyse.

Kit comprenant un tube avec le milieu de transport et un écouvillon sécable


- tube conique à jupe, compatible avec la centrifugation
- tube 95 kPa, répondant aux normes de transport des matières infectieuses
- **capuchon** à vis parfaitement hermétique, avec stries pour une utilisation avec des gants
- **étiquette** avec espace de marquage
- **écouvillon** avec tige avec point de rupture à 80 mm et tête en viscose
- après le prélèvement, l'écouvillon est cassé au niveau de la rupture, et l'extrémité restante est insérée dans le tube de transport
- l'intérieur du capuchon présente une encoche dans laquelle on insère l'écouvillon cassé en 2
- stériles
- 2 volumes de remplissage pour s'adapter aux différentes applications :
 - 1 ml pour éviter l'effet de dilution,
 - 3 ml pour plusieurs tests sur le même échantillon

Milieu spécial virus

- milieu liquide
- conçu pour les prélèvement nasaux, du nasopharynx, des yeux, de la peau ou des muqueuses
- apte à la conservation de **virus** : *Papilloma*, *Herpès Virus Porcin type 1 (HPV1)*, *influenza aviaire (H7N1)*, *Influenza A (H1N1)* ou *H1N1 2009 pandémique*, *Virus Herpès*, *Coronavirus*, etc.
- conservation pendant plus de 72 heures
- l'addition d'antibiotiques à la formule évite la présence de bactéries



l'intérieur du capuchon présente une encoche qui capte et fixe l'écouvillon inséré dans le tube

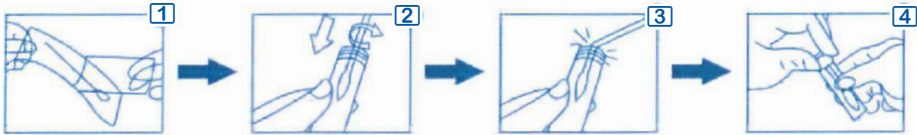

- 1 Retirer l'écouvillon du sachet

2 Après le prélèvement, décharger l'écouvillon dans le milieu de transport

3 Casser l'écouvillon dans le tube au niveau du point de rupture

4 Revisser le tube au maximum : l'écouvillon est capté par le capuchon et s'y fixe

milieu de culture	capuchon	tige	extrémité	tube	référence	Prix HT
1 ml SPÉCIAL VIRUS	rouge	Polystyrène	viscose	10 ml	CT4110	les 100
3 ml SPÉCIAL VIRUS	rouge	Polystyrène	viscose	10 ml	CT4111	les 100