

certification
écouvillons
DM 93/42/CE

certification
tubes + milieu
CE IVD 98/79

Kits de prélèvement avec écouvillons floqués stériles pour prélèvements nasopharyngés et milieu de transport spécial virus VTM tige sécable plastique / tête en nylon floqué

**Kit avec écouvillon floqué sécable,
tube avec le milieu de transport,
et sachet Biohazard**

- kits prêts à l'emploi, faciles à utiliser, évitent les contaminations croisées
- écouvillon** stérile tige Ø 2,5 x 150 mm, **tête en nylon floqué Ø 2,5 mm**, point de rupture à 82 mm environ de l'extrémité de prélèvement, emballage en peel-pack individuel
- tube** conique à jupe, pré-étiqueté, avec large zone de marquage, capuchon à vis parfaitement hermétique, avec stries pour une utilisation avec des gants
- tube 10 ml, avec 3 ml de milieu spécial virus
- sachet** Biohazard pour échantillons à risque biologique
- après le prélèvement, l'écouvillon est cassé au niveau de la rupture, et l'extrémité restante est insérée dans le tube de transport, lui-même placé dans le sachet Biohazard


Milieu spécial virus (VTM = Virus Transport Media)

- 3 ml de milieu activé liquide à base de milieu de culture de Hank's, indicateur pH, conservateurs pour virus et d'inhibiteurs de prolifération bactérienne (antibiotique) - *Fiche de données de sécurité sur demande*
- apte à la conservation de **virus** : *Papilloma, Herpès Virus Porcin type 1 (HPV1), influenza aviaire (H7N1), Influenza A (H1N1) ou H1N1 2009 pandémique, Virus Herpès, Coronavirus, Hfmd, etc.*
- conservation pendant plus de 72 heures
- l'addition d'antibiotiques à la formule évite la présence de bactéries




point
de rupture


Solution testée et validée
par de nombreux CHU,
hôpitaux et laboratoires de
biologie médicale.
Références sur demande

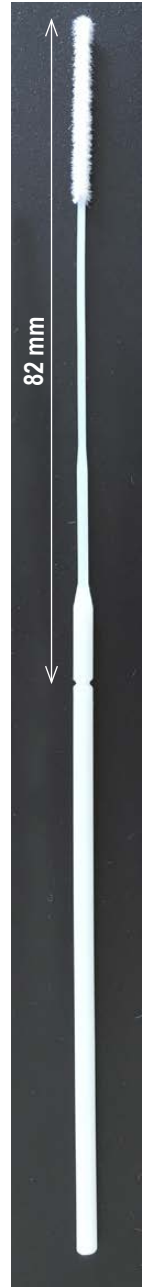


milieu de transport	tube de transport			écouvillon		référence	Prix HT
	capacité	dim.	capuchon	tige	extrémité		
3 ml SPÉCIAL VIRUS	10 ml	Ø 16x87 mm	blanc	ABS	Nylon floqué	LMR1925VTM	les 50

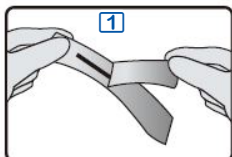


1 Retirer l'écouvillon du sachet

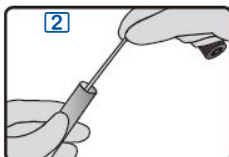


2 Après le prélèvement, décharger l'écouvillon dans le milieu de transport

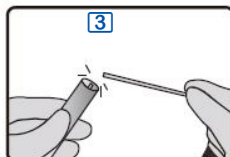


3 Casser l'écouvillon dans le tube au niveau du point de rupture

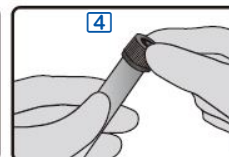

4 Revisser le tube au maximum

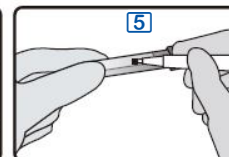

5 Marquer l'échantillon

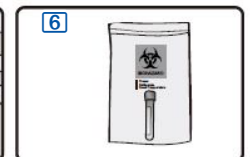

6 Mettre le tube dans un sachet Biohazard

CH de Saint-Brieuc

Bonsoir,

Désolé de ma réponse tardive, c'est très bien de notre côté, on valide que se soit le milieu et l'écouvillon. Nous sommes intéressés !

Bien cordialement. Bon week end

Laetitia ELOY
CH de Saint-Brieuc
Technicienne référente
Centre Hospitalier de Saint-Brieuc
02.96.01.72.57 (67257)

CH de Mantes la Jolie

Bonjour,
Nous avons reçu et testé les écouvillons ce jour, ils nous conviennent parfaitement.

Merci de me faire parvenir :

- La disponibilité de ce produit en termes de date de livraison
- Le conditionnement
- Une proposition de prix
- La fiche technique

D'avance je vous remercie pour votre réponse.
Bien cordialement.

Isabelle JEAN
Cadre de santé
CH François Quesnay - 2, Boulevard Sully
78201 - Mantes la Jolie

Ligne directe 01 34 97 41 21
Télécopie 01 34 97 40 19
Standard CH 01 34 97 40 00
Courriel : i.jean@ch-mantes-la-jolie.fr

Laboratoire BIOMEGA VANHESTE-BAUDURET

Bonjour, après test, les écouvillons sont parfaits.

Pouvez-vous me faire un devis pour 10000 par Ex. ...

Cordialement
Frederique BAUDURET
Co-Directrice LABORATOIRE BIOMEGA VANHESTE-BAUDURET

8 B Rue des Remises,
94100 Saint-Maur-des-Fossés

Téléphone : 01 48 83 00 27

Solution testée et validée par :

- CH de Saint-Brieuc -
02.96.01.72.57
- CH François Quesnay de
Mantes-La-Jolie - 01 34 97 41 21
- Laboratoire BIOMEGA
VANHESTE-BAUDURET à
Saint-Maur-des-Fossés - 01 48
83 00 27