

certification  
écouvillons  
DM 93/42/CE

certification  
tubes + milieu  
CE IVD 98/79

## Kits de prélèvement : écouvillons Régular secs stériles, milieu de transport CARY BLAIR et sachet de transport

### Écouvillon

- écouvillons Régular stériles longueur totale 150 mm
- tige en plastique ABS flexible Ø 2,5 mm, sécable à un point de rupture à 80 mm de l'extrémité de la tête
- stérilisation à l'oxyde d'éthylène (OE)
- tête Ø 5 mm en nylon, résistante au déchetage

### Tube

- tube 95 kPa, dimensions : Ø13 x 83 mm
- capuchon bleu avec joint d'étanchéité et orifice pour insérer l'écouvillon
- fond avec jupe de maintien
- étiquette de marquage
- contient 1 ml de milieu CARY BLAIR

### Milieu CARY BLAIR

- modification du milieu Stuart
- conçu, à l'origine, pour les prélèvements des selles
- remplacement du glycérophosphate par un tampon inorganique phosphaté, suppression du bleu de méthylène, augmentation du pH à 8,4
- apte à la conservation des **organismes fécaux et anaérobies** : *Neisseria gonorrhoeae*, *Vibrio cholerae*, *Vibrio parahaemolyticus*, *Haemophilus influenzae*, *Neisseria meningitidis*, *Bordetella pertussis*, *Streptococcus pneumoniae*, *Shigella flexneri*, *Pasteurella pestis*, *Campylobacter Spp.*, etc.
- conservation entre +5 et +25°C
- péremption 12 mois

### Sachet Biohazard

- sachet Biohazard pour échantillons à risque biologique


| Milieu CARY BLAIR              |
|--------------------------------|
| Phosphate de sodium mono acide |
| Thioglycolate de sodium        |
| Chlorure de sodium             |
| Chlorure de calcium            |
| Agar bactériologique           |
| Eau distillée                  |




point  
de rupture




| milieu de transport | tube de transport |          |          | écouvillon |           | référence | Prix HT |
|---------------------|-------------------|----------|----------|------------|-----------|-----------|---------|
|                     | capacité          | dim.     | capuchon | tige       | extrémité |           |         |
| 1 ml CARY BLAIR     | 7 ml              | Ø13x83mm | bleu     | ABS        | Nylon     | LMR1915   | les 60  |

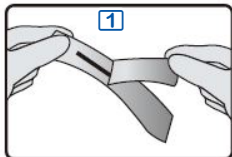


1 Retirer l'écouvillon du sachet

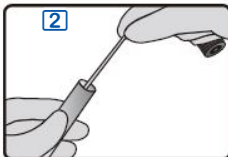


2 Après le prélèvement, décharger l'écouvillon dans le milieu de transport

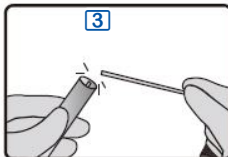

3 Casser l'écouvillon dans le tube au niveau du point de rupture

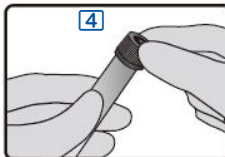

4 Revisser le tube au maximum

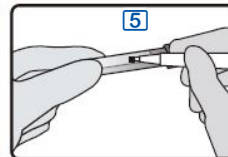

5 Marquer l'échantillon



6 Mettre le tube dans un sachet Biohazard